




Ophtalmoscope PanOptic™ de Welch Allyn

Un concept optique innovant pour des vues panoramiques du fond de l'œil

Développé et breveté par Welch Allyn, créateur du premier ophtalmoscope portable manuel à éclairage direct, le PanOptic est un concept révolutionnaire en ophtalmoscopie. Grâce à une conception optique brevetée innovante, appelée optique Axial PointSource™, l'ophtalmoscope PanOptic facilite amplement les examens du fond de l'œil.

CHAMP DE VISION

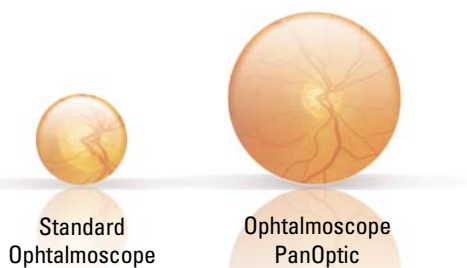

Standard
Ophtalmoscope

Ophtalmoscope
PanOptic

5X

Une vision 5 fois
plus large du fond de l'œil

Les avantages du PanOptic :

- Une entrée rapide et facile dans les petites pupilles non dilatées.
- Un champ de vision 5 fois plus large qu'avec les ophtalmoscopes standard dans un œil non dilaté.
- Champ de vision de 25°, au lieu de 5° avec les ophtalmoscopes classiques.
- Augmentation de 26 % du grossissement, pour voir plus facilement les détails de la rétine.
- La plus grande distance entre le médecin et le patient apporte plus de confort à chacun.
- Compatibilité totale avec les sources d'alimentation 3,5 V de Welch Allyn.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Une nouvelle technologie révolutionnaire pour une différence que vous pouvez voir

- **Optique Axial PointSource™ brevetée :**
Cette technologie brevetée facilite l'entrée dans les pupilles non dilatées et offre un champ de vision de 25°, ce qui permet d'avoir une vue du fond de l'œil 5 fois plus large qu'avec un ophtalmoscope classique dans un œil non dilaté.
- **Lampe halogène HPX™ :**
Donne une lumière plus blanche et plus brillante.
- **Système d'extinction des reflets éblouissants :**
Empêche les interférences de reflets éblouissants indésirables.
- **Sources d'alimentation 3,5 V de Welch Allyn :**
Compatible avec toute source d'alimentation 3,5 V standard, notamment : poignées sur chargeur de table, poignées à batterie convertible, transformateurs muraux et poignée lithium ion.



- **Œillère patient :** L'œillère permet de définir et maintenir une distance de vue correcte, apporte la stabilité de l'image, sert de point pivotant pour tourner autour de la rétine, aide à l'orientation et masque la lumière ambiante. L'œillère est nettoyable et réutilisable.
- **Poignée souple du PanOptic :** Un design ergonomique pour un confort, un équilibre et un accès aux commandes maximum.
- **Mollette de mise au point dynamique :** Permet d'ajuster la mise au point en un mouvement régulier et continu pour un contrôle plus précis et une vision optimale. Plage d'ouvertures de -20 à +20 dioptries.
- **Cadran d'ouverture :** Permet de sélectionner des tailles de faisceau micro, petit et grand. Inclut également un filtre éliminant le rouge et une ouverture en fente. Ouverture demi-lune en option (11810 uniquement) ou filtre bleu de cobalt avec lentilles grossissantes ajoutées (11820 uniquement) pour les examens de la cornée.



71812-MPS
Ensemble de chargeur de table



76791-2MP2 Système de diagnostic intégré

PanOptic : Informations pour les commandes

11810	11820	
■	■	3 tailles de faisceau micro, petit et grand
■	■	Ouverture en fente
■	■	Filtre éliminant le rouge
■		Ouverture demi-lune (permet une association de perception de profondeurs et de champs de vision)
	■	Filtre bleu cobalt avec lentilles grossissantes ajoutées pour les examens de la cornée (remplace l'éclairage ultraviolet de Woods)

Spécifications du PanOptic :

Dimensions : L 13 cm - l 3,5 cm - H 9,5 cm
sans œillère (avec l'œillère : L 16,7 cm)
Poids : 217 g sans œillère ; 227 g avec l'œillère
Plage de mises au point : -20 à +20 dioptries

Informations sur les composants :

Œillères patient (jeu de 5 œillères réutilisables) - 11870
Lampe halogène HPX - 03800-U
Lentilles de vision cornéenne (utilisables avec le 11820) - 11875
Mallette de transport de la Trousse de diagnostic (rigide) - 05258-M
Mallette de transport de la Trousse de diagnostic (souple) - 05815-M

Pour plus d'informations sur l'ophtalmoscope PanOptic, contactez votre représentant Welch Allyn.

Welch Allyn France,
Immeuble Le Galilée, 10 rue Fontaine Rouge, Val d'Europe, 77700 CHESSY
Tel: +33 (0) 1 60 09 33 66 Fax: +33 (0) 1 60 09 67 97

Welch Allyn BENELUX
Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)
Telefoon: 015-7505000, FAX: 015-7505050
www.welchallyn.com